

Brugervejledning

DK

ColourTemp digitalt termometer

Product no RE98030

VIGTIGT!

**LÆS VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT
FØR BRUG
OPBEVAR TIL SENERE LÆSNING.**




Leveringsomfang:

Termometer, brugsanvisning, 1 x 3 V CR2032-batteri

Ibrugtagning

For at tænde apparatet trykkes på tænd/sluk-knappen. Et kort signal høres. Først udfører termometeret en selvtest, hvor displayet viser alle segmenter med grøn baggrundsbelysning. Derefter vises den seneste måleværdi i cirka 2 sekunder. Termometeret er klar til måling, når displayet viser "Lo", og °C- eller °F-symbolet blinker. Under målingen vises den aktuelle temperatur løbende, og °C-symbolet blinker under hele måleprocessen. Efter cirka 10 sekunder er målingen afsluttet. Målingen afsluttes, når temperaturen er stabil. Et akustisk signal lyder (3 gange med 3 langsomme bip), °C-symbolet holder op med at blinke, og den målte temperatur vises. Ved temperaturer under 37,6 °C (99,7 °F) lyser displayet grønt. For at forlænge batteriets levetid bør du slukke termometeret efter målingen ved kort at trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis dette ikke gøres, slukker termometeret automatisk efter cirka 10 minutter, ledsaget af et bip. Du kan vælge mellem visning i °C og °F. For at ændre enheden holdes tænd/sluk-knappen nede i cirka 2 sekunder, indtil "Lo" vises. Lige før °C-symbolet begynder at blinke, trykkes der igen på knappen, indtil den ønskede måleenhed vises.

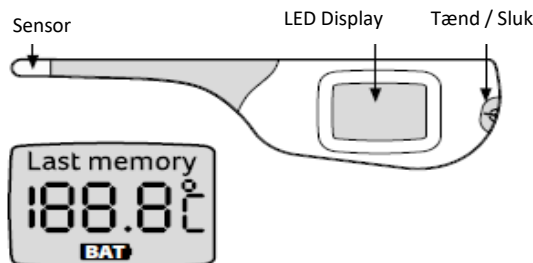

Sikkerhedsanvisninger

Termometeret er udelukkende beregnet til måling af menneskets kropstemperatur. ColourTemp-termometeret er kun designet til de målepunkter på kroppen, der er angivet i brugsanvisningen. Kontroller apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis du opdager skader, må apparatet ikke anvendes. Termometeret er beregnet til privat brug.

Børn bør ikke bruge apparatet uden hjælp fra en voksen. Medicinsk udstyr er ikke legetøj. Børn under 12 år bør ikke måle deres kropstemperatur uden opsyn. Dette termometer indeholder små dele, der kan sluges eller udgøre en kvælningssfare for børn. Opbevar altid termometeret uden for børns rækkevidde. Apparatet må ikke åbnes, bortset fra låget til batteri rummet. Der må ikke foretages ændringer på apparatet. Hvis apparatet fungerer forkert, skal du kontakte forhandleren. Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde, da der er risiko for, at det kan sluges.

Termometeret indeholder følsomme elektroniske komponenter og skal beskyttes mod stød, bøjning, høje temperaturer og direkte sollys. Den minimale måle tid frem til signaltonen skal altid overholdes.

Dette termometer er udstyret med en fleksibel målespids, som giver øget komfort og sikkerhed under målingen, især ved små børn, sovende personer eller personer med nedsat bevidsthed. Spidsen må ikke bøjes mere end 90°. Brug af apparatet i områder med stærke elektromagnetiske felter, for eksempel tæt på en mobiltelefon, kan føre til fejl. Ved usædvanlige temperaturmålinger bør du straks kontakte din læge. Bemærk, at bærbare og mobile trådløse kommunikationsenheder kan påvirke apparatet. Yderligere oplysninger kan fås hos den angivne kundeserviceadresse eller bagerst i brugsanvisningen.

Feberalarm

Hvis der måles en kropstemperatur over 37,6 °C (99,7 °F), aktiveres feberalarmen (3 gange med 4 hurtige bip) og displayet lyser rødt. Hvis temperaturen ligger uden for måleområdet, vises "Lo" i displayet ved temperaturer under 32 °C (90 °F) og "Hi" ved temperaturer over 43,9 °C (111 °F).

Visning af seneste måleværdi

Den senest gemte måleværdi vises automatisk, når termometeret tændes, i cirka 2 sekunder.

Måleudsving

Afhængigt af målepunktet på kroppen kan de målte temperaturer variere. Dette er normalt og skyldes den naturlige temperaturfordeling i kroppen. For eksempel svarer en rektal temperatur på 36,6 °C til cirka 36,1 °C målt oralt og cirka 35,6 °C målt under armen. Ved flere målinger bør der holdes en pause på cirka 3 minutter mellem målingerne.

Målepunkter

Rektal (i endetarmen)

Dette er den mest præcise metode og egner sig især til spædbørn og småbørn. Termometerspidsen føres forsigtigt 2–3 cm ind i endetarmen. Måletid: ca. 10 sekunder.

Oral (i mundhulen)

I mundhulen er små temperatursvingninger fra måling til måling normale, da temperaturen varierer i forskellige områder. Placer termometeret i en af de to varmelommer under tungen, til venstre eller højre for tungens rod. Temperaturen måles korrekt, når sensoren har god kontakt med vævet. Luk munden i cirka 1 minut før målingen og træk vejret roligt gennem næsen. Placer derefter målespidsen i varmelommen og luk munden. På den måde påvirkes resultatet ikke af indåndingsluften. Måletid: ca. 30 sekunder.


Under armen (aksillær måling)

Denne målemetode giver set fra et medicinsk perspektiv for unøjagtige værdier. Den er derfor uegnet til at udføre præcise målinger. Årsagen er, at kontakten mellem temperatursensoren og armhulen er væsentligt dårligere end ved oral eller rektal måling. Dermed sker der ingen nødvendig temperaturudligning mellem temperatursensoren og det omkringliggende væv, som er påkrævet for en sikker måling

Målemetode	Anbefalet måletid	Gennemsnitlig afvigelse i forhold til rektal metode
Rektalt	Indtil lydsignalet	-
I mundhulen	Indtil lydsignalet	- 0,4 C til - 1,5 C
I armhulen	Minimum 5 min.	- 0,7 C til - 2,0 C

Batteriskift

Når symbolet BAT vises i displayet, er batteriet opbrugt, og det skal udskiftes. Erstat det opbrugte batteri med et af samme type. Fremgangsmåde: Åbn batteri rummet med en mønt. Tag det brugte batteri ud, og indsæt et nyt CR2032-batteri. Vær opmærksom på placeringen — plustegnet (+) på batteriet skal vende opad. Skru derefter dækslet på batteri rummet fast igen. Batterier kan købes i ur- eller elektronikforretninger. Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere dem til korrekt bortskaffelse. Aflever batterierne hos din elektronikforhandler eller på din lokale genbrugsstation.

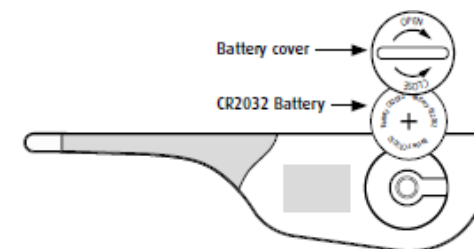

Bemærkninger vedrørende håndtering af batterier

Hvis væske fra en battericelle kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det berørte område skylles med vand, og der skal søges lægehjælp. Hvis et batteri er lækket, bør du tage beskyttelses-handsker på og rengøre batteri rummet med en tør klud. Beskyt batterier mod overdreven varme.



Kvælningssfare!

Små børn kan sluge batterier og risikerer at blive kvalt. Opbevar derfor altid batterier uden for små børns rækkevidde.

Rengøring og desinfektion:

DK

Desinficér termometeret og målespiden med alkohol (75 % isopropylalkohol). Alle apoteker forhandler alkoholtupfere (alkoholservietter) fra forskellige producenter, som kan bruges til at aftørre hele apparatet. Tør termometeret af med en blød klud. **MÅ IKKE** koges eller rengøres i opvaskemaskinen, da dette kan beskadige termometerets funktion og medføre bortfald af garantien. Apparatet må ikke rengøres med fortynder eller kemiske opløsningsmidler. Opbevar termometeret tørt, støvfrit og beskyttet mod snavs og direkte sollys.

Mikrobakteriel kontaminering

Da en 100 % desinfektion i hjemmet ofte ikke er mulig, anbefales det stærkt, at hver patient bruger sit eget febertermometer.



Bortskaffelsesvejledning

Batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål findes der beholdere til batteribortskaffelse i butikker, der forhandler batterier, samt på kommunale genbrugsstationer. Når apparatet har nået slutningen af sin levetid, skal det bortskaffes korrekt via en kommunal indsamlingsordning for elektrisk og elektronisk affald.

Lovgrundlag for markedsføring i EU

Producenten er certificeret i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Apparatet overholder den europæiske standard EN60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet og opfylder kravene i EN 12470-3.

Garanti

Gem venligst kvittering, brugsanvisning og artikelnummer. Eventuelle reklamationer eller garantikrav behandles udelukkende gennem forhandleren. Den lovpligtige reklamationsperiode på 2 år gælder fra købsdatoen. Skader forårsaget af forkert brug er ikke omfattet af garantien.

For at gøre brug af garantien kræves købskvittering samt en beskrivelse af fejlen. Alle tekniske data, oplysninger og egenskaber for produktet i dette dokument er udarbejdet efter bedste viden og svarer til forholdene på tidspunktet for offentliggørelsen. De oplysninger, som reer stiller til rådighed, bør være korrekte og pålidelige, men virksomheden påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i dokumentet og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produkt design eller specifikationer uden forudgående varsel.

Tekniske data:

Type:	ColourTemp digitalt febertermometer
Artikelnummer:	98030
Måleområde	32,0 °C til 43,9 °C (90 °F ~ 111 °F)
Målenøjagtighed:	±0,1 °C (±0,2 °F) i vandbad mellem 35,0–42,0 °C (95 °F–107,6 °F) ±0,2 °C (±0,4 °F) ved en omgivelsestemperatur 22,0 °C (71,6 °F)
Måleenheder:	Celsius (°C) og Fahrenheit (°F)
Feberalarm:	Akustisk og optisk ved >37,6 °C (99,7 °F)
Display:	3-cifret flydende krystal-display (LCD)
Batteritype:	1 x CR2032 (inkluderet i leveringen)
Nettovægt:	27g
Omgivelsestemperatur:	
Drift:	+10 °C til +31 °C, ved 30 % til 85 % relativ luftfugtighed
Opbevaring/transport:	0 °C til +50 °C, ved 25 % til 90 % relativ luftfugtighed

Symbol forklaring:

	Forsigtig
	Tilladelig opbevarings- og transporttemperatur samt luftfugtighed
	Tilladelig driftstemperatur samt luftfugtighed
	Producent
	Brugsanvisning skal følges
	Applikationsdel type BF
	Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
	Partibetegnelse
	Beskyttelse mod indtrængning af faste fremmedlegemer med en diameter > 12,5 mm. Beskytter mod midlertidig nedsænkning
	CE-mærkningen bekræfter overensstemmelse med de grundlæggende krav i direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr.



WellKang Ltd.; Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Northern Ireland, UK



Cotronic Technology Ltd

Floor 4~6, Block 7, west of Zhoushi Road, XiXiang Street, Bao An Zone, Shenzhen, Guangdong, China

Importør Europa:

Reer GmbH
Mühlstrasse 41
71229 Leonberg
Germany

Distributør DK, NO, SE:

Scan Style ApS
Jellingvej 5
9230 Svenstrup J
Danmark

CE
2460