
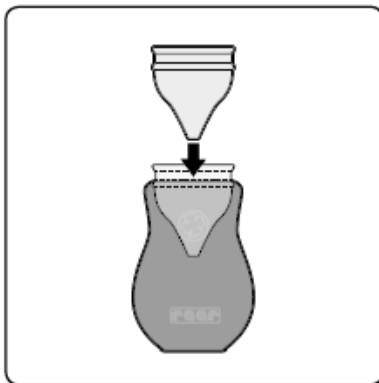


Brugervejledning DK Brukerveiledning NO Bruksanvisning SE

Næsesuger Reer

Product nr. RE79112

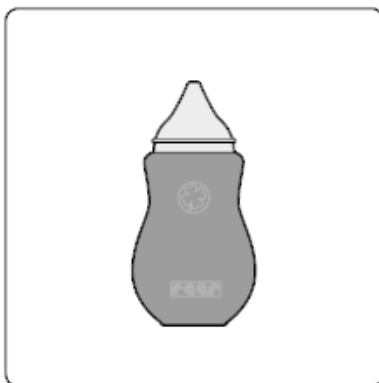

For hygiejnisk opbevaring
For hygienisk oppbevaring
För hygienisk förvaring

Læs denne brugsanvisning grundigt, før du tager produktet i brug.

Ellers kan produktets sikkerhedsfunktion blive forringet. Opbevar vejledningen til senere brug.

⚠ Advarsel!

Dette produkt er udviklet til at beskytte dit barn. Det er ikke et legetøj og erstatter ikke voksnes tilsyn.

Sikkerhedsanvisninger:

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Brug det ikke, hvis der er tegn på fejl eller skader. Dette produkt er ikke et legetøj! Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendelse:

Tryk pumpbolden sammen på midten, og før sugespidsen forsigtigt ind i det tilstoppede næsebor. Luk det andet næsebor let med en finger. Slip derefter trykket på pumpbolden, så sekretet suges ud.

Rengøring og opbevaring:

Rengør næsesugeren før første brug med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug ikke kemikalier, der kan beskadige materialet. Desinfektion er mulig i en steriliseringsmaskine (vaporisator) eller ved at koge den i 5 minutter. Gem venligst kvittering, brugsanvisning og artikelnummer. Reklamations- eller garantikrav skal udelukkende behandles via forhandleren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk.

Ellers kan produktets sikkerhetsfunksjon bli svekket. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse.

⚠ Advarsel!

Dette produkt er utviklet for å beskytte barnet ditt. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke voksent tilsyn.

Sikkerhetsanvisninger:

Bruk kun produktet til det tiltenkte formålet. Ikke bruk det dersom det viser tegn til feil eller skade. Dette produktet er ikke et leketøy! Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk:

Trykk sammen pumpen på midten, og før sugespissen forsiktig inn i det tette neseboret. Hold det andre neseboret tett lukket med en finger. Slipp deretter trykket på pumpen, slik at sekretet suges ut.

Rengjøring og oppbevaring:

Rengjør nesesugeren før første bruk med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk kjemikalier som kan skade materialet. Desinfisering er mulig i sterilisator eller ved å koke den i 5 minutter. Vennligst oppbevar kvittering, bruksanvisning og artikkelnummer. Reklamasjons- eller garantikrav skal utelukkende håndteres av forhandleren.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

Annars kan produktets säkerhetsfunktion försämras. Spara anvisningen för framtida bruk.

⚠ Varning!

Denna produkt är utvecklad för att skydda ditt barn. Den är inte en leksak och ersätter inte vuxnas tillsyn.

Säkerhetsanvisningar:

Använd produkten endast för avsett ändamål. Använd den inte om den visar tecken på fel eller skada. Denna produkt är inte en leksak! Förvaras utom räckhåll för barn.

Användning:

Tryck ihop pumpbollen i mitten och för in sugspråtsen försiktigt i det täppta näsborret. Håll det andra näsborret lätt stängt med ett finger. Släpp sedan trycket på pumpbollen så att sekretet suges upp.

Rengöring och förvaring:

Rengör nässugen före första användning med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd inte kemikalier som kan skada materialet. Desinfektion kan göras i en steriliseringsapparat eller genom att koka den i 5 minuter. Spara kvitto, bruksanvisning och artikelnummer. Reklamations- eller garantiärenden hanteras endast via återförsäljaren.