

Bruksanvisningen

Basaltermometer Reer Mama

Produkt nr. RE31020

**Viktig! Les bruksanvisningen
nøye før bruk – Ta vare på den
for senere**



Leveringsomfang: Termometer – Bruksanvisning – Beskyttelseshylster – 1x 3V batteri CR2032

Sikkerhetsanvisninger: Termometeret er utelukkende beregnet for måling av menneskets kroppstemperatur. – Termometeret er kun designet for de målepunktene på kroppen som er angitt i bruksanvisningen. – Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Hvis du oppdager skader, må apparatet ikke lenger brukes. – Termometeret er beregnet for privat bruk. – Barn må kun benytte apparatet under oppsyn av en voksen. Medisinsk utstyr er ikke leketøy. – Barn under 12 år bør ikke måle kroppstemperaturen sin uten oppsyn. – Dette termometeret inneholder små deler som kan svelges eller utgjøre en kvelningsfare for barn. Oppbevar alltid termometeret utenfor barns rekkevidde. – Apparatet må ikke åpnes, bortsett fra ved batteridekselet. Det må ikke gjøres endringer på apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, kontakt din forhandler. – Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde – det er fare for at det svelges. Termometeret inneholder følsomme elektroniske komponenter. Beskytt det derfor mot støt, bøying, høye temperaturer og direkte sollys. Den minimale måletiden frem til lydsignalet må alltid overholdes. Ved unormale temperaturresultater bør du straks kontakte legen din. Vær oppmerksom på at bærbare og mobile HF-kommunikasjonsenheter kan påvirke dette apparatet. Ytterligere informasjon kan fås via den angitte kundeserviceadressen. Desinfiser termometeret etter hver bruk. Utfør ikke målinger dersom termometeret er vått, da dette kan føre til unøyaktige måleresultater. Termometeret er IKKE egnet til prevensjonsformål.

Igangsetting: Last ned gratisappen "reer Basaltermometer" i App Store eller Google Play Store. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din, og gå i appen til "Innstillinger" og "Enhetsilkoblinger". Trykk på "Enhetsilkoblinger", og slå deretter på termometeret med på/av-knappen ved siden av LCD-displayet. På displayet vises kort et signal 88,8 med en lydtone, etterfulgt av den sist lagrede temperaturen. Denne prosessen tar ca. 3 sekunder. Velg deretter enhets-ID-en via appen og koble enhetene sammen. Mens de er koblet, blir appen synkronisert med termometeret.

Måling: Mål din basale kroppstemperatur daglig, straks etter at du våkner om morgenen og før du står opp. Utfør alltid målingen på samme måte (samme tidspunkt og sted). Overhold den minimale måletiden på tre minutter, inntil pipetonen høres. Målingen fortsetter også etter pipetonen. Dokumenter temperaturmønsteret over minst 2 menstruasjonssykluser, og start ved begynnelsen av menstruasjonen. Målenøyaktigheten kan påvirkes av ytre faktorer som alkohol-/medisininntak, søvnmangel eller stress.

Målesteder: I munnhulen (oralt) – Plasser termometeret under tungen, enten til venstre eller høyre ved tungens rot. Lukk munnen og pust rolig gjennom nesen for å unngå at inn- eller utåndingsluft påvirker målingen. Måling et annet sted, f.eks. under armen, gir unøyaktige verdier og anbefales ikke. De målte verdiene overføres automatisk til appen. Temperaturmålingen fungerer som en veiledning. For større nøyaktighet kan du også observere livmorhalsslimets konsistens. Fertiliteten avhenger av ulike faktorer som alder, sykluslengde og eventuelle medisinske tilstander. Ved tvil bør du konsultere legen din. Ved daglige målinger opprettes en temperaturkurve i appen, som du kan bruke til presis overvåking av syklusen din. Ut fra dine inntastede data under "Min syklus" vises de forskjellige fasene i syklusen med farger: - **Grønn** markerer dine fertile dager - **Den blå prikken** viser eggøsning - **Rosa** angir menstruasjonsperioden - **Oransje** indikerer dine infertile dager


Utskifting av batterier: Når symbolet vises i displayet, er batteriet oppbrukt og må skiftes ut. Bytt batteriet med ett av samme type. Gjør følgende: Lås opp batteridekselet (f.eks. med en mynt) og dreier en kvart omdreining mot høyre. Fjern det gamle batteriet, og sett inn det nye batteriet (type CR2032). Vær oppmerksom på korrekt plassering. Pluss-tegnet (+) på batteriet skal vende oppover. Lukk deretter dekselet igjen. Batterier kan kjøpes hos spesialforretninger innen klokke eller elektronikk. Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Du er ifølge loven forpliktet til å levere batterier separat. Lever brukte batterier hos en spesialforhandler eller på din lokale gjenvinningsstasjon.

Merknader vedrørende håndtering av batterier: Fjern batteriet fra enheten dersom den ikke skal brukes på lengre tid. Dersom en battericelle lekker på hud eller i øyne, skyll området med vann og oppsøk lege. Hvis et batteri har lekket, bruk beskyttelseshansker og rengjør batterirommet med en tørr klut. Beskytt batterier mot overoppheting.

Advarsel: Små barn kan svelge batterier og risikerer kvelning. Oppbevar batterier utilgjengelig for små barn.

Rengjøring og desinfeksjon: Desinfiser termometeret og målespissen med alkohol (75 % isopropylalkohol). Alle apotek selger alkoholbaserte rengjøringservietter fra ulike produsenter, som du kan bruke til å tørke av hele enheten. Tørk termometeret med en myk klut. **PRODUKTET MÅ IKKE KOKES ELLER VASKES I OPPVASKMASKIN.** Dette kan forringe termometerets funksjon og vil medføre at garantien bortfaller. Rengjør ikke enheten med kjemiske tynnere eller løsemidler. Oppbevar termometeret på et tørt, støvfritt og rent sted – vekk fra direkte sollys.

Mikrobiell forurensning: Siden fullstendig desinfeksjon ofte ikke er mulig i husholdningsbruk, anbefales det sterkt at hver person har sitt eget termometer.

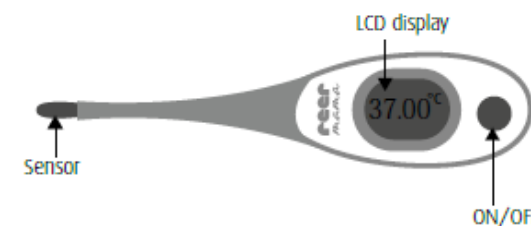

Merk:

- Når den målte temperaturen er under 32 °C, vil LCD-displayet vise "Lo". Når den målte temperaturen er over 42,99 °C, vil LCD-displayet vise "Hi".
- Hvis "----" vises i LCD-displayet, venter termometeret på en Bluetooth-forbindelse. Du har 30 sekunder til å opprette forbindelse til termometeret. Hvis ikke, hoppes Bluetooth-forbindelsen over, og normal temperaturmåling starter.
- Legg inn dataene dine i appen under innstillingene "Min syklus".

Forklaring av symboler

I bruksanvisningen, på emballasjen samt på typeskiltet på apparatet og tilbehøret brukes følgende symboler:

	Forsiktig
	Tillatt lagrings- og transporttemperatur og -luftfuktighet
	Tillatt driftstemperatur og -luftfuktighet
	Produsent
	Bruksanvisning må følges
	Applikasjonsdel type BF
	Avfallshåndtering i henhold til EU-direktivet for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)
	Partibenevnelse
	Beskyttelse mot inntrenging av faste fremmedlegemer med en diameter >12,5 mm. Beskyttet mot midlertidig nedsenking.
	CE-merke fra det utpekte organet (TÜV Rheinland)



Veiledning for avhending: Batterier skal avhendes på riktig måte. Det finnes egne innsamlingsbeholdere for batterier i butikker som selger batterier, samt på kommunale gjenvinningsstasjoner. Når apparatet har nådd slutten av sin levetid, skal det leveres inn via en kommunal innsamlingsordning for elektronisk avfall

Lovgivning for markedsføring av enheten i EU: Produsenten er sertifisert i henhold til retningslinjene i 93/42/EØF for medisinsk utstyr. Enheten oppfyller den europeiske standarden EN60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet og tilfredsstiller kravene i EN 12470-3.

Garanti:

- Vennligst oppbevar kvitteringen, bruksanvisningen og produktnummeret.
- Garantikrav eller krav i henhold til andre garantiløfter skal håndteres av forhandleren. Den lovpålagte garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen.
- Ansvar for mangler omfatter ikke skader som følge av feilaktig håndtering.
- Kjøpsbevis og en beskrivelse av feilen er nødvendige ved garantikrav.
- De tekniske spesifikasjonene, veiledningene og egenskapene for produktet som er beskrevet her, er utarbeidet etter beste viten og overbevisning og er korrekte på tidspunktet for trykking.
- Enhver veiledning utstedt av Reer forventes å være korrekt og pålitelig. Likevel påtar Reer seg intet ansvar for eventuelle feil i dette dokumentet og forbeholder seg retten til å foreta endringer i produktdesign og/eller spesifikasjoner uten forutgående varsel.

Tekniske spesifikasjoner::

Type:	Reer mama Basal termometer
Produktnummer:	31020 / DMT-4735b
Måleområde:	32,00°C to 42.99°C (89.60°C-109.3°C)
Målepresisjon	±0,05°C (±0.1°F) at a temperature between 35,00°C~38,00°C (95.00°C~100.40°F) ±0,1°C (±0.2°F) in a water bath T<35,00°C (95.00°F) or T>38,00°C (100.40°F)
Måleenhet	Celsius (°C)
Display:	4½-digit liquid-crystal display (LCD display)
Batteritype	1x CR2032 (inkludert)
Nettovekt	cirka / ca. 20g
Omgivelsestemperatur	
I drift	+5 °C to +40 °C, at 15% - 95 % relativ luftfuktighet
Lagring/Transport	-20 °C to +55 °C, at 15 % - 95 % relativ luftfuktighet
Måletid	3 minutter
Forventet levetid	3 år
Batteriets levetid	Cirka 300 målinger (med en måletid på 3 minutter)

EC REP Company Address

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

EAN kode: 4013283310205

Farge: Hvit og grå

Importør Europa:
Reer GmbH
Mühlstrasse 41
71229 Leonberg
Germany

Distributør DK, NO, SE:
Scan Style ApS
Jellingvej 5
9230 Svenstrup J
Danmark

Vend →